

PHYWE Systeme GmbH & Co. KG  
Robert-Bosch-Breite 10  
D-37079 Göttingen

Telefon +49 (0) 551 604-0  
Fax +49 (0) 551 604-107  
E-mail [info@phywe.de](mailto:info@phywe.de)

### Betriebsanleitung



Abb. 1: 02150-00 PHYWE Hafttafel mit Gestell

### ZWECK UND EIGENSCHAFTEN

Demo Physik Tafel mit Gestell zur Aufnahme von magnetisch haftenden Komponenten.

**Achtung! Zur Beschriftung nur wasserlösliche Stifte verwenden!**

### MONTAGEHINWEISE

Zum Befestigen der Stellfüße an der Tafel nutzen Sie die Teile von Abb. 2, die zum Lieferumfang gehören. Die Füße sind bereits vormontiert, diese müssen wie in Abb. 3 gezeigt an die Hafttafel angebracht werden.

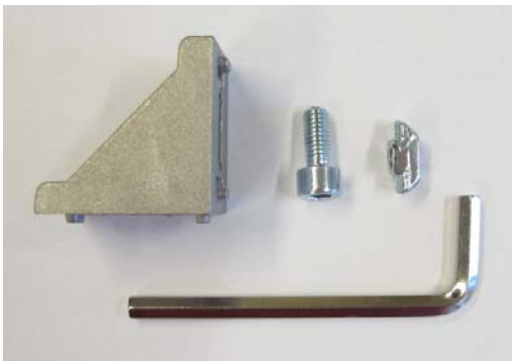


Abb. 2: Lieferumfang Befestigungsmaterial



Abb.3: Befestigung des Stellfußes an der Hafttafel

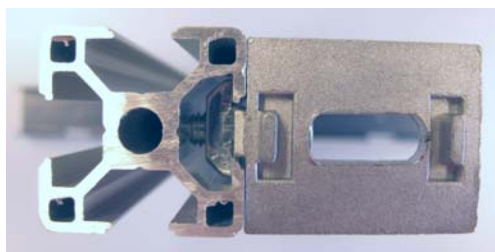


Abb.4



Abb. 5

Abb. 4 u. 5: Befestigung des Winkels mit Hilfe der Hammermutter und Innensechskantschraube. Hierbei ist unbedingt darauf zu achten, dass die Hammermutter von oben in das Profil eingesetzt und waagrecht im Profil sitzen muss.